



21世紀の
テクノロジーで
お灸を科学する



先進の電子温灸器

ハンディQ

体調改善医療機器のパイオニア

CHUO

新陳代謝力の加速

自然治癒力の復活

自己免疫力の活性

東洋医学を暮らしに活かす

命に活力をここに癒し

医療が届くまでの痛みの軽減

急性や慢性の多くの痛みを和らげます。痛み改善

温灸刺激による体調管理

睡眠不足などによる不調を軽減します。睡眠改善

温灸刺激によるマッサージ

肩こりや腰痛などを改善し、生活の質を改善します。

温灸刺激による血行の促進

血行障害による様々な症状を軽減します。

その日のストレス
その日の内に
ご家庭で使える
健康改善医療器です。

本来、生命がもっている力をやさしく取り戻す東洋医学の力を暮らしに持ち込める唯一の医療機器が

ハンディQ

あなたのこころとからだを元気にします。



●ペンタイプで持ちやすい。女性の方でも気軽に使用できます。

操作手順

- ①電源スイッチをONにする
- ②温度設定スイッチ(オレンジ色)で温度を選ぶ
- ③加温スイッチ(黄色)をクリックする

直接刺激 温熱刺激温度

低温 47℃ 1回3秒間
 高温 51℃ 1回3秒間
 圧痛点へ少しずらしてクリック


連続使用も可能

一定の温度を出し続けます。(プロ仕様)

ハンディQ 簡単マスターDVD(別売)

緊急ツボハンドブック添付

価格 68,000円 税別

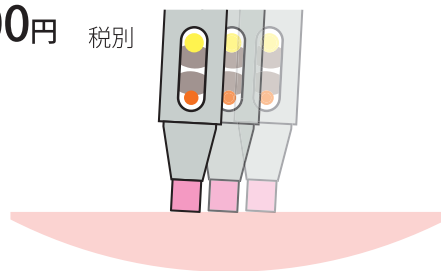

健康生活改善計画

東洋医学の施術効果をセルフケアなどの家庭でも使える家庭用医療機器としての安全性も備え、被災現場でも使えるようにまで向上しました。

温灸施術を いつでも どこでも 何度でも

煙が出ない 火がいらぬい においもしない そして電気もいらぬい

■ハンディQ(EQ-10)	228AGBZX00119A01	刺激温度・刺激時間	付属品
分類	温灸器 管理医療機器クラスII	低温 47℃±2℃ 高温 51℃±2℃	・単三型アルカリ電池.....2本
形式	EQ-10	クリック3.0秒 長押し4.5秒	・収納ポーチ.....1個
使用環境温度	0℃~40℃	刺激面積	・保証書、取説
電池	単三電池×4個 (マンガン乾電池使用不可)	寸法	・ヨモギエクス メディカルパッチ
定格	DC6.0V 10W	重量	



体調改善医療機器の
パイオニア

CHUO

お問い合わせは

取扱代理店

<http://www.chuoms.co.jp>

E-mail mail@chuoms.co.jp

科学で健康を考えるメディカルシステム

株式会社 チュウオー

本社・大阪営業所 〒665-0874 兵庫県宝塚市中筋1-9-32

TEL.(0797)88-2121(代) FAX.(0797)88-1313

東京営業所 〒124-0012 東京都葛飾区立石5-5-23

TEL.(03)3697-2523(代) FAX.(03)3697-2021